

Spytprøver (OF oral fluid)

Vejledning til udtagning, opbevaring og forsendelse af sputprøver til PCR for PRRS

Version 1.0 – 2023

PRRS
TAG HANDLING



Udtagning af sputprøve med bomuldsreb

Farestald: Prøv at få soen til at bide i rebet, inden det hænges op. Hænges, så både soen og pattegrisene kan nå det. Rebet må ikke røre stibunden
Lad rebet hænge i 30-40 min



Min
30
min




Min
30
min



Udtagning af sputprøve med bomuldsreb

Smågrise/slagtesvin: Hæng et reb per 30 grise, rebet må ikke røre staldbunden
Lad rebet hænge i 30-40 min

Placer rebet i en ren plasticpose og vrid så meget væske ud af rebet som muligt. Klip et lille hul i posen. Sputprøve opsamles i en beholder med skruelåg
Sørg for, at der minimum er 2 ml sputprøve i røret

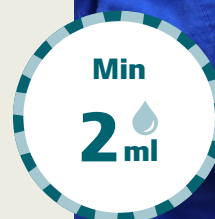

Min
2
ml



Grader
4-8



Grader
-20



Sputprøven skal på køl (4-8 grader) så hurtigt som muligt efter udtagelsen

Hvis sputprøven skal opbevares længere end 5 dage inden forsendelse skal prøven fryses ved -20 grader

Prøven tages direkte fra køleskab eller fryser
Emballeres godt sammen med køleelementer

Husk at skrive sputprøve (OF oral fluid) på indsendelsesblanketten



Grader
4-8

